

*privo*

## Pencari Vena



Mudah dalam pencarian vena

gambar  
Jelas dan akurat

Mempermudah posisi  
penusukan jarum

Mengurangi kesalahan  
penusukan jarum

Dapat digunakan  
semua jenis umur


*Prima Vein*

Prima Vein berfungsi untuk memproyeksikan pembuluh darah di permukaan kulit . Produk menggunakan teknologi infra merah untuk mendapatkan gambar yang detail, jelas dan akurat.

Memudahkan dokter , perawat dan petugas medis untuk menemukan pembuluh darah dan mengarahkan posisi tusukan jarum. Memberikan tingkat keakuratan yang tinggi, mengurangi pengulangan tusukan jarum dan mengurangi rasa sakit.

Sebuah teknolgi yang menjadikan alat sebagai investasi berharga bagi setiap pengguna yang memerlukan pendeteksi vena .

Dapat digunakan semua jenis pasien , dewasa , anak dan bayi . Sangat bermanfaat untuk untuk pasien gemuk , berkulit gelap

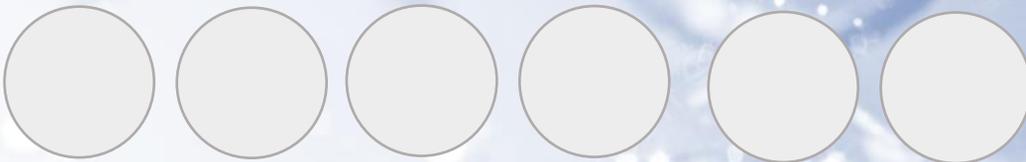

PARAMETER	URAIAN
Ukuran Layar	2,4 inch
Sumber pencahayaan	Infrared
Panjang gelombang	760 - 940 nm
pilihan warna	12 pilihan warna
Tingkat kecerahan	Bisa Di atur
Ukuran Pasien	Dewasa, Anak , bayi
Jarak optimal pendeteksian	25cm sampai dengan 35 cm
Akurasi posisi pembuluh darah	± 0,3 mm
Akurasi resolusi pembuluh darah	± 0,3 mm
Tingkat kebisingan	≤ 30 dB
Batery	Lithium 4800mA
Pengisian	Bisa di charge
Waktu pemakaian	3,5 jam
tengangan charger	5 V 2A
Tegangan input	100 V - 240 V 50Hz-60Hz
Berat	450 gram
Ukuran unit	± (24 x 6,5 x 5,5 cm )

**privo**

DISTRIBUTED BY:

**PT. Prima Citra Inovindo**

Cibubur Times Square Blok B1 No 17

Jl Alternatif Cibubur KM3

Bekasi Kota

Telp : 021 - 50207596

Email : info@pci-tech.co.id

www.pci-tech.co.id

MANUFACTURE BY :

**PT. Enesers Mitra Berkah** Taman tekno

blok K2 no 12BSD city Tangerang

selatan Telp : 021-7566361

Email : info@enesers.com

www.enesers.com