

*privo*

Patient Temperature Management

*Prima cool*



Hypo/hyperthermia

## Teknologi terdepan

Layar 10,1" high definition touch screen .  
Menampilkan grafik suhu .  
Dilengkapi fast rotary button mempermudah pengoperasian .  
Suhu air, suhu tubuh dan suhu blanket mudah diatur dengan skala 0,1.  
Adanya fungsi timer lebih nyaman untuk dioperasikan.



## Keunggulan :

Dual Output ( dua Pasien), dan kontrol suhu independen.  
Fungsi ganda pendinginan dan penghangatan .  
Blanket dan Topi/tudung dilengkapi dengan cover  
Menggunakan quick connector , dengan self locking guna mencegah kebocoran .  
Kompresor dan sistem pendingin efisiensi tinggi , bebas CFC.  
Daya rendah dan suhu cepat turun.  
Pompa dengan tingkat kebisingan rendah,  
Desain selang air yang memperlancar pertukaran panas dan dingin.  
Dua pemantauan ketinggian air

## Safety / Aman :

Dual Sensor suhu air ,  
Dual protection untuk kontrol suhu yang tidak normal dan kontrol mekanis.  
Dilengkapi Perangkat perlindungan arus listrik , lebih aman untuk digunakan.  
High definition touch screen untuk menampilkan dengan jelas suhu tubuh, suhu blanket, suhu air, ketinggian air, status alarm, grafik suhu.  
High cleanliness sensor untuk memantau suhu tubuh, suhu blanket .  
Kontrol ganda dengan mesin dan blanket.  
Fungsi alarm suara dan visual yang sempurna untuk suhu tubuh, suhu blanket, suhu air dan ketinggian air.





Pedriatik



Neurology



onkology




Rehabilitasi



ICU



OK

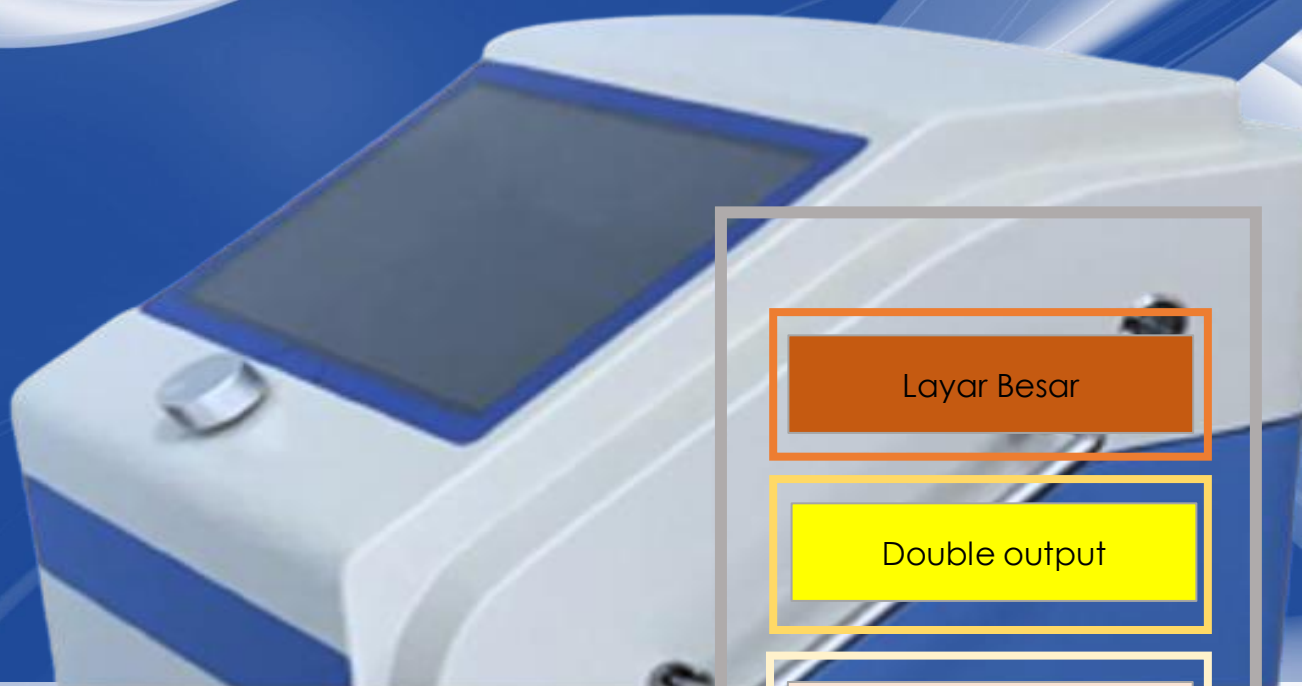

Layar Besar

Double output

blanket&topi +cover

Grafik suhu

Setting mudah

**Acessoriess**



2 Blanket + cover



2 Topi + cover



1 Sensor suhu  
1 Sensor blanket

# SPESIFIKASI

PARAMETER	URAIAN
<b>TAMPILAN DAN KONTROL</b>	
Fungsi	Menghangatkan dan mendinginkan
Konfigurasi	Blanket + Cover
	Topi + Cover
Port keluaran	Double output
System Kontrol	Kontrol elektronik, 10.1 inch touch screen
Tampilan Layar	suhu tubuh, suhu Blanket, Suhu air, ketinggian air, Timer, Mode, Running, Grafik suhu
Kontrol Pemilihan	Touch kontrol
	tombol rotary
Type kontrol Suhu	Machine control
	blanket control
<b>SUHU</b>	
Sensor Suhu	Suhu Tubuh
	suhu Blanket
Rentang suhu Blanket/topi	4.0°C-25°C(dingin)
	26°C-40°C(hangat)
Rentang suhu tubuh	30°C-40°C(dingin)
	30°C-37°C(hangat)
Rentang suhu Air	4.0°C-25°C(dingin)
	26°C-40°C(hangat)
Presisi kontrol	0.1°C
Kecepatan pemanasan (tanpa beban)	2.5°C/min
Kecepatan pendinginan (tanpa beban)	2°C/min
<b>ALARM</b>	
System Alarm	Ketinggian air, suhu air, suhu tubuh, suhu blanket, kesalahan system
<b>AIR</b>	
Kapasitas pengisian	± 4 Liter
Pemantauan ketinggian	Monitor
	Kaca indikator
<b>TEKNIKAL</b>	
Tegangan Listrik	220V 50HZ
Daya Listrik	≤550VA
Noise	≤45dB(a)
Dimensi	420x335x950 (mm)



DISTRIBUTED BY:

**PT. Prima Citra Inovindo**

Ciburur Times Square Blok B1 No 17

Jl Alternatif Ciburur KM3

Bekasi Kota

Telp : 021 - 50207596

Email : info@pci-tech.co.id

www.pci-tech.co.id

MANUFACTURE BY :

**PT. Enesers Mitra Berkah** Taman tekno

blok K2 no 12BSD city Tangerang

selatan Telp : 021-7566361

Email : info@enesers.com

www.enesers.com